

TIP VOOR DE PRAKTIJK:

De juiste omgang met bloedmonsters

Volgorde

Houd de volgorde van de monsterafname strikt aan; begin met serum.



S

Serum



C

Citraat/CPDA



H

Heparine/
Homocysteïne



E

EDTA



F

Natriumfluoride

Afbeelding: Vacuetten

Tip:
onthoud
SCHEF

Bloedafname

1 Vermijd langdurige sturing, bij voorkeur niet langer dan **30 seconden** (maximaal 1 minuut).

2 Voer de venapunctie uit, laat de sturing los en neem vervolgens het bloed af.

3 Zwenk elk buisje direct na afname **minimaal 3 x** (niet schudden!).

4 Houd u aan de **standaardvoorwaarden** voor bloedafnames.

Centrifugeren

- Geadviseerde instelling: **10 min bij 3000-4000 rpm**
- Serum- en serumgelbuisjes dienen voor het centrifugeren gedurende **minimaal 30 minuten** en maximaal 60 minuten staand te worden bewaard.
- Voor EDTA- of citraatplasma moeten de desbetreffende buisjes onmiddellijk na de bloedafname worden gecentrifugeerd.

rechtop bewaren

rechtopstaand gecoaguleerd monster na centrifugeren

JUIST

liggend gecoaguleerd monster na centrifugeren

liggend bewaren

FOUT



biovis.de

VOLG ONS OP



biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18 | 65552 Limburg-Eschhofen
info@biovis.de | biovis.de



biovis'
DIAGNOSTICS

TIP VOOR DE PRAKTIJK:

De juiste omgang met bloedmonsters



Afpipetteren van het plasma

- **Benodigde materialen:**
transferpipet, centrifugebuisje
- **Het heldere serum/plasma moet worden overgebracht naar een leeg centrifugebuisje.**
 - In geval van serumgelbuisjes kan het serum eventueel voorzichtig in het centrifugebuisje worden overgegoten.
 - Bij citraat-, EDTA- en heparinebuisjes (zonder gel) dient het plasma met behulp van een transferpipet te worden afgepipetteerd. **Let op: Geen rode bestanddelen mee afpipetteren!**




Transferpipet
(Artikel-Nr. 2600171)



Centrifugebuisje
(Artikel-Nr. 60.610.100)

BELANGRIJK

Plak het dienovereenkomstige etiket (bijv. serum, edta-plasma of citraatplasma) op het centrifugebuisje. Plak daarnaast de barcode op het buisje of schrijf desnoods de naam van de patiënt erop.

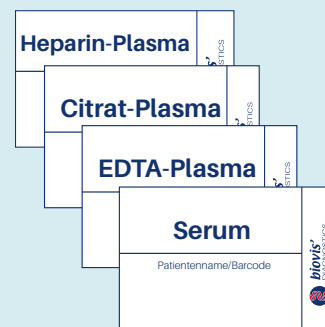

Verzendvoorwaarden

Gebruik voor alle bloedbuisjes onze zwarte transportkokers en stuur deze per post op in de hiervoor bestemde verzendenvlop.



Transportkoker
(Artikel-Nr. HT1011)



Verzendenvlop
(Voorbeeld)

De materialen kunnen via ons **bestelformulier** gratis worden besteld.



Verdere tips en informatie vindt u op onze website onder pre-analyse.



biovis.de

VOLG ONS OP



biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18 | 65552 Limburg-Eschhofen
info@biovis.de | biovis.de



biovis
DIAGNOSTICS